


Afname instructie E-swab (COVID-19)

1



Open de verpakking en haal de swab (wattenstaaf) eruit.

2

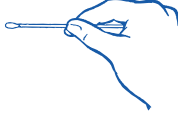


Houd de swab ongeveer in het midden vast, tussen duim en wijsvinger.

3




Strijk het wattenstaafje eerst één keer langs de linker gehemelteboog / de keelamandelen (naast de huid) en één keer langs de rechter.

4

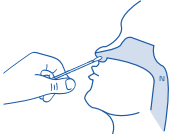

Breng daarna **hetzelfde** wattenstaafje door één neusgat (via de onderste neusgang) tot de nasopharynx (N).

5

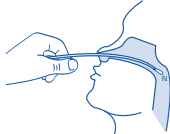

Trek met een roterende beweging het wattenstaafje terug. N.B. tranen/hoesten bij dit onderzoek is normaal. Enkele malen slikken voorkomt hoesten.

6



Houd de swab in uw hand en terwijl u deze vasthoudt, schroeft u het dopje van het buisje.

7



Doe de swab in het buisje, met het wafje naar beneden.

8



Breek de swab voorzichtig af bij het afbreekstreepje. Gooi het afgebroken staafje weg.

9



Schroef de dop op het buisje en draai deze goed dicht.

10



Vul uw gegevens in op de bijgeleverde sticker (als dit nog niet is gedaan) en plak deze op de zijkant van het buisje. **Schrijf ook de afnamedatum op de sticker.**

11



Doe het buisje terug in de blister. Stop de blister in de sealbag en doe deze terug in de envelop.

Instructie E-swab (COVID-19)

Na een afspraak met uw (huis)arts heeft u een aanvraagformulier en een afnameset mee naar huis gekregen om u (uit voorzorg) te testen. In de envelop vindt u een sealbag met daarin een plastic doosje (blister). In de blister vindt u een swab (wattenstaaf) en een buisje.

U kunt de afname thuis verrichten, in alle rust en privacy. Om de kwaliteit van de uitslag te waarborgen is het van belang dat de afname op de juiste manier door u wordt uitgevoerd. Lees daarom deze instructies aandachtig door voordat u start met de afname.

Vorbereiding

- ⊕ Was uw handen met water en zeep voordat u aan de afname begint
- ⊕ Zorg ervoor dat de swab de huid niet raakt
- ⊕ Let op dat u geen vloeistof uit het buisje morst
- ⊕ De vloeistof blijft in de buis
- ⊕ Was bij onbedoeld contact met de vloeistof de huid met water en zeep
- ⊕ Spoel het oog met veel water bij spatten van de vloeistof in het oog

Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Zorg ervoor dat de envelop compleet is:

- ⊕ Draai de dop van het buisje stevig vast om lekkage te voorkomen.
- ⊕ Plaats het buisje (met uw gegevens op sticker) in de blister en verpak dit in het plastic zakje en plak deze dicht.
- ⊕ Zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld.
- ⊕ Stop het plastic zakje samen met het ingevulde formulier in de envelop.
- ⊕ Lever de envelop in bij uw huisarts.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ info@diagnovum.nl 🌐 www.diagnovum.nl ☎ 088 007 54 00

diagnovum  Bravis
ziekenhuis