

Afname Urinekweek groene buis met boorzuur



1




Trek het dopje van de monovette® af en bevestig de meegeleverde tip (dopje niet weggooien).

2



Dompel de tip in de middenstroomurine (uitleg zie achterzijde). Trek de zuiger naar boven tot aan de merkstreep.

3



Draai de monovette® om met de tip naar boven. Trek de zuiger verder naar beneden.

4




Breek de zuiger af, verwijder de tip en plaats de dop terug op de monovette®. Gooi de zuiger in de afvalbak.

5



Meng het monster door de monovette® 5x te kantelen.

6

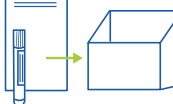

Controleer of alle gegevens en de dag/tijd waarop de urine is verzameld, correct zijn vermeld op de buis.

7



Gooi het restant van de urine in het potje weg in het toilet. Schroef de dop goed op het potje. Het potje kunt u daarna in de afvalcontainer werpen.

Let op

Controleer of op het aanvraagformulier en de buis uw gegevens staan:

- ⊕ Afnamedatum en afnametijd
- ⊕ Persoonsgegevens (uw achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer)

Instructie Urinekweek

Uw (huis)arts of verloskundige heeft urineonderzoek aangevraagd. Nadat u de urine heeft ingeleverd wordt deze onderzocht in het laboratorium. In de verpakking vindt u een groen urine buisje met gele tip. Daarnaast heeft u van uw huisarts een urinebeker meegekregen. Om de kwaliteit te waarborgen is van belang dat de afname op de juiste manier wordt uitgevoerd. Lees daarom deze instructie aandachtig door voordat u start met de afname.

Afname instructies en gebruiksaanwijzing materiaal

Voor dit onderzoek dient u het middelste deel van uw urine op te vangen in het potje; de zogenaamde middenstroomurine. Dat betekent dat u het eerste beetje urine in het toilet plast, het tweede gedeelte opvangt in het potje en het laatste deel weer in het toilet plast. Vul het potje ongeveer halverwege. Volg daarna de stappen op de achterzijde.

Inleveren

Lever het materiaal na afname dezelfde dag in bij uw huisarts.

Uitslag

De resultaten van het onderzoek worden naar uw (huis)arts of verloskundige gestuurd. Hij/zij bespreekt met u de uitslag.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op:

✉ info@diagnovum.nl 🌐 www.diagnovum.nl 📞 088 007 54 01

diagnovum  